

# Omnicolori

## Prophylaxe Instrumente

## Anwendungs-Übersicht



### GRACEY

Fig 5-6

Für alle Wurzelflächen an den Prämolaren und Frontzähnen.  
OK + UK - leichte Abwinkelung



Fig 7-8

Für bukkale, linguale sowie palatinale Flächen der  
Prämolaren und Molaren OK + UK - mittlere Abwinkelung




Fig 11-12

Für mesiale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren  
OK + UK - mittlere Abwinkelung



Fig 13-14

Für distale Wurzelflächen an Prämolaren und Molaren  
OK + UK

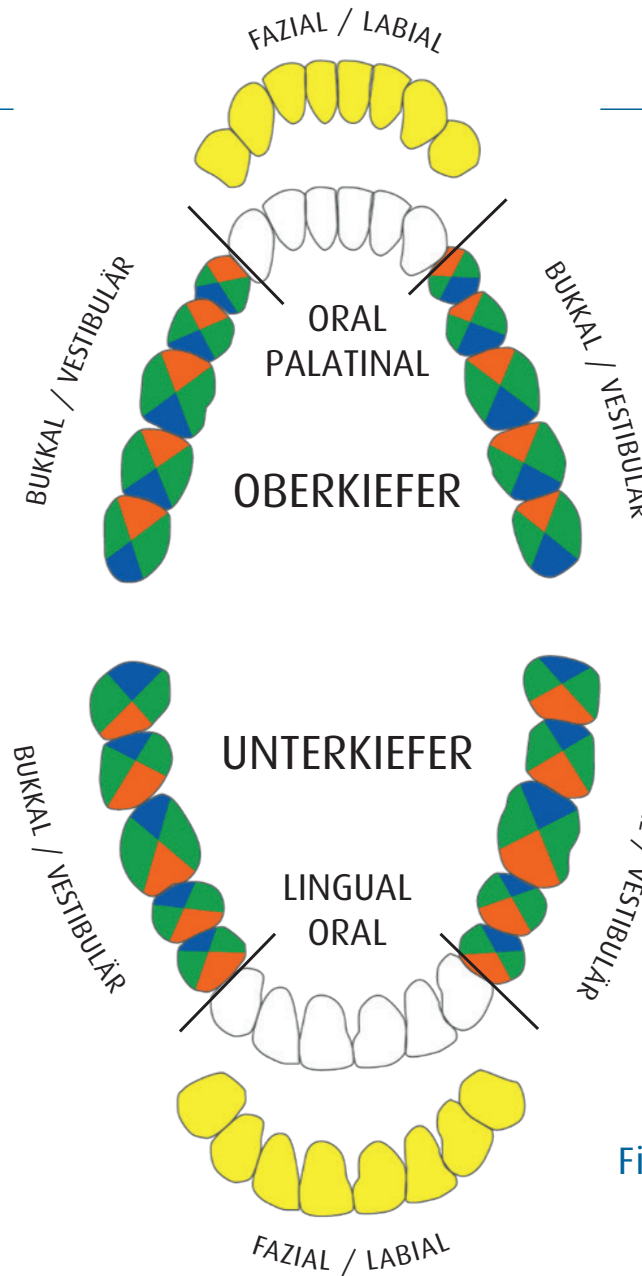

### UNIVERSAL

Scaler für Front- und Seitenzahnbereich -  
leicht abgewinkelte Arbeitsenden.

Fig H6-H7



Universalscaler

Fig M23



Universalkürette

Fig M23A

Fig M23

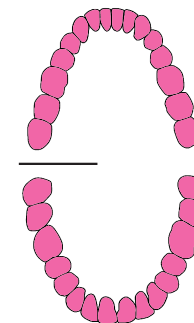


Fig M23A

